

Procédure de raccordement des câbles M5 aux connecteurs.

Le câble M5 fourni avec notre système de photodétecteur est muni de broches mâles aux deux extrémités.
La procédure de raccordement est donc la même pour le FDA (amplificateur) et le FDH (tête).


1 Les connecteurs sont munis d'une clavette.

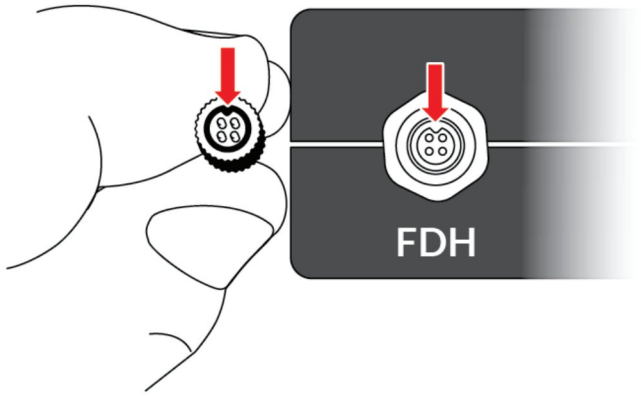


2 Assurez-vous que les repères aux deux extrémités sont alignés, puis insérez délicatement le câble.

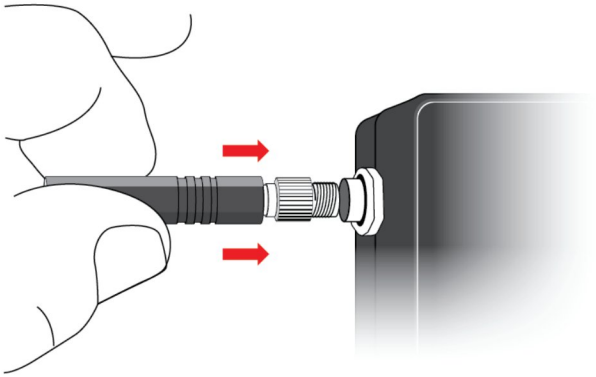

3 **Sans faire tourner le câble**, continuez à l'insérer dans le connecteur jusqu'à ce qu'il atteigne la butée. Si les rainures sont bien alignées, les filets devraient se trouver en partie à l'intérieur du connecteur.

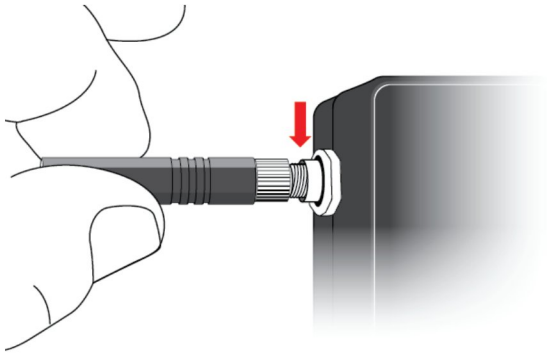

4 Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre le manchon métallique du connecteur de câble pour le serrer.

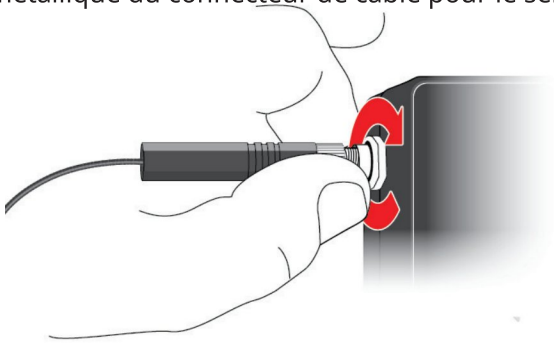

Remarque : Lorsque vous serrez le connecteur, veillez à **ne tourner que le manchon métallique, et NON le câble dans son ensemble.**

5 Pour débrancher le câble, veuillez suivre la même procédure dans l'ordre inverse.

doric